

Elektrooptični pojav

Samo Krejan

marec 2025

1 Uvod

Z zunanjim električnim poljem lahko navadno vplivamo na strukturo snovi. V kristalih naprimer tako lahko spremenimo obliko osnovne celice, v tekočinah lahko pride do spremembe gostote in orientacijskega urejanja molekul ali pa celo do spreminjanja oblike posameznih molekul. Te spremembe seveda vplivajo tudi na optične lastnosti snovi. Mi se zanimamo za vpliv statičnih električnih polj na optične lastnosti snovi in temu rečemo *elektrooptični pojav*. Če bi seanimali za nestatična električna polja, bi bila to razprava *nelinearne optike*.

Poznamo linearni elektrooptični pojav, ki se pojavi zgolj v anizotropnih snoveh, ter kvadratni elektrooptični pojav, ki ga lahko najdemo v vseh materialih. V splošnem, bi za opis elektrooptičnega pojava potrebovali tenzorje, a ker je naša keramika homogena in simetrična ob transformaciji $(x, y, z) \rightarrow (-x, -y, -z)$, zaradi česar se s tenzorji ne rabimo ukvarjati in je za to keramiko mogoč le kvadratni elektrooptični pojav. Zunanje električno polje zlomi simetrijo izotropne keramike, zato ločimo dve spremembi lomnega količnika: sprememba za svetlobo ki je polarizirana vzporedno z električnim poljem in za svetlobo, ki je nanj pravokotno polarizirana.

V keramiko posvetimo z svetlobo z valovno dolžino λ in variramo zunanje električno polje jakosti E . Spreminjata se lomna količnika vzporedno n_{\parallel} in pravokotno n_{\perp} z smerjo polja. Oba se spreminjata s kvadratom električnega polja. Ponavadi nas ne zanima absolutna vrednost količnikov pač pa zgolj razlika med njima. To opisuje elektrooptični pojav poimenovan po Johnu Kerru 1:

$$n_{\parallel} - n_{\perp} = B\lambda E \quad (1)$$

Konstanto B imenujemo Kerrova konstanta. Elektrooptični pojav je osnova mnogih tehnologij, vse od atenuatorjev, do leč s spremenljivo goriščno razdaljo, tudi pri zapisovanju in branju optičnih informacij.

2 Potrebščine

- He-Ne plinski laser; $\lambda = 632.6 \text{ nm}$, vertikalno polariziran linearno,
- svetlobni modulator s PLZT keramiko, izvor visoke napetosti (0 - 1000V), voltmeter (multimeter),
- fotodioda vezana na namizni multimeter,
- polarizatorji pritrjeni na vrtljivih nosilcih,

- dvolomna celica iz tekočega kristala v nosilcu, ki omogoča vrtenje, kotomer,
- prenosnik z ustrezno programsko opremo.

3 Naloga

1. Izmerite kotno odvisnost prepustnosti polarizatorja za linearno polarizirano svetlobo.
2. Izmerite prepustnost dveh pravokotno postavljenih polarizatorjev, ko med njiju postavite tretji polarizator in ga vrtite.
3. Določite Kerrovo konstanto PLZT keramike.
4. Analizirajte polarizacijo svetlobe po prehodu skozi dvolomno snov in določite debelino celice.

4 Rezultati in analiza


Pri prvem delu naloge pričakujemo zvezo med zasukom polarizatorja in prepuščeno močjo svetlobe kot 2

$$P(\phi) = P_0 + P_1 \sin^2(\phi + \delta) \quad (2)$$

To funkcijo smo fitali na izmerjene podatke, s čimer smo dobili vrednosti parametrov:

$$P_0 = (1.8 \pm 0.8)10^{-6}A, \quad P_1 = (1.13 \pm 0.01)10^{-4}A, \quad \delta = -4.59 \pm 0.06$$

Uspešnost fita lahko opazujemo na grafu 1:

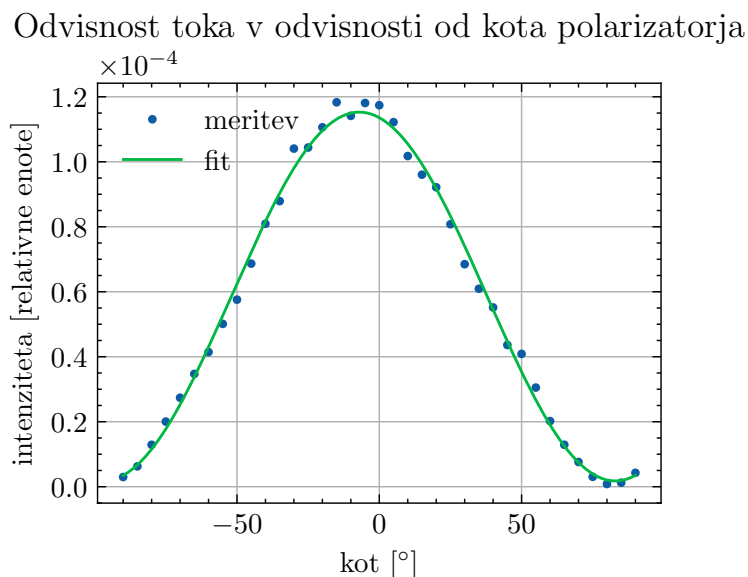

Slika 1: Meritve in fit meritev glede na enačbo 2


Podobno situacijo opazujemo, ko med dva ortogonalno postavljena polarizatorja postavimo tretjega in ga vrtimo. Tam pričakujemo zvezo 3:

$$P(\phi) = P_0 + P_1 \sin^2(2\phi + \delta) \quad (3)$$

Tu z fitom na izmerjene podatke dobimo vrednosti:

$$P_0 = (2.1 \pm 0.4)10^{-6} A, \quad P_1 = (2.05 \pm 0.06)10^{-5} A, \quad \delta = 1.57 \pm 0.02$$

Spet uspešnost fita prikažemo na grafu. Glej graf 2:

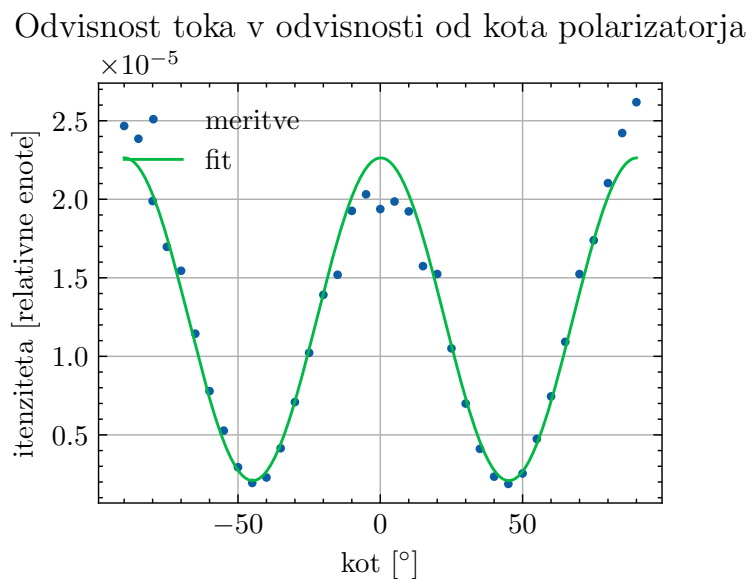

Slika 2: Meritve in fit meritev glede na enačbo 3

S tem smo zaključili s prvim in drugim delom naloge. Sledila je meritev kerrove konstante za PLZT keramiko.